

Specialist in o.a. wondzorgmateriaal.


Zorgadvieslijn voor advies & bestellingen: **0800 - 6226226**

of via het voorschrijfportaal voor online bestellingen:

<https://wis.mediq.nl>



Wondprotocol 2024

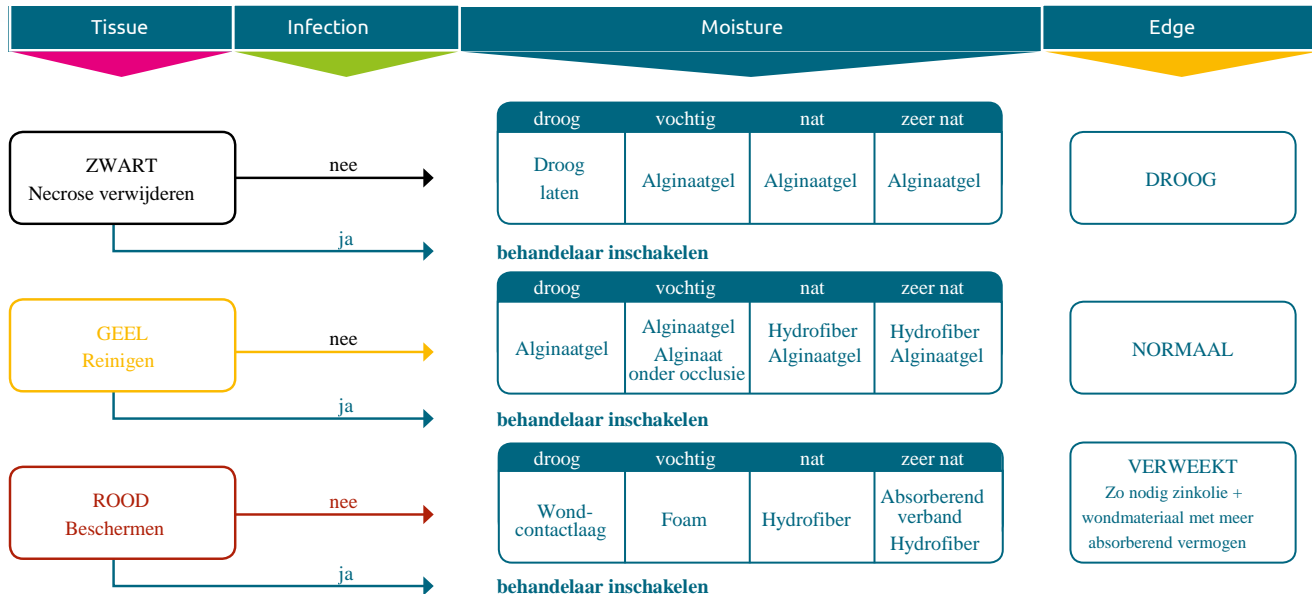

Product	Eigenschappen	Toepassing	Productkeuze
(antibacteriële) Hydrogel	De hydrogel creëert een vochtig wondmilieu welke het proces van autolytisch debridement stimuleert. Werkt antimicrobieel en remt de bacteriegroei.	Vul de wond op zonder de wondranden te overschrijden. Alleen via behandelbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Prontosan wondgel (B.Braun) • Advacyn gel (Biologiq)
Alginaatgel	Combinatie van hydrogel en Ca algiinaat. Creëert een fysiologisch wondmilieu dat wondheling bevordert en tegelijkertijd de wond reinigt. Indien nodig voegt het vocht toe of het absorbeert vocht.	<ul style="list-style-type: none"> • Breng gel 5mm dik aan. • Mag maximaal 3 dagen in de wond blijven. • Bij een necrotische wond dagelijks verschonen. • Flaminal Hydro: vochtige wond. Flaminal forte (zeer) natte wond. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flaminal Hydro (Flen Pharma) • Flaminal Forte (Flen Pharma)
Wond-contactlaag	Klinitulle: steriel zalfkompres gemaakt van zacht non-woven materiaal geïmpregneerd met witte paraffine. Cuticell classic: is een niet-verklevend wijdmazig zalfgaas van katoen geïmpregneerd met paraffine. Mepitel en Cuticell contact: de siliconen wondcontactlaag is zelfhechtend. Hecht aan de wondrand, maar niet aan de wond.	<ul style="list-style-type: none"> • Klinitulle en Cuticell classic: mag maximaal 24 uur in de wond blijven. • Mepitel en Cuticell contact: mag maximaal 7 dagen in de wond blijven. • Product kan geknipt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klinitulle zalfkompres (Klinion) • Cuticell classic (Essity) • Mepitel (Molnlycke) • Cuticell contact (Essity)
Algiinaat	Steriel calcium/natrium algiinaatverband dat veel vocht absorbeert en snel in een gel verandert, zodat er een vochtige omgeving ontstaat waarin de wond kan genezen en reinigen.	<ul style="list-style-type: none"> • Breng een droog wondverband aan op het vochtig wondbed. • Niet over de wondranden aanbrengen. • Indien niet helemaal verzadigd, dan vochtig maken met NaCl. • Product kan geknipt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltostat (Convatec) • Kliniderm algiinaat (Klinion) • Cutimed alginate (Essity)
Hydrofiber	Dit sterk absorberende verband creëert door interactie met het wondexsudaat een zachte gel. Hierdoor ontstaat een vochtig wondmilieu voor een optimale wondgenezing.	<ul style="list-style-type: none"> • Mag maximaal 7 dagen in de wond blijven. Product kan geknipt worden. • Minimaal 2 cm over de wondranden aanbrengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aquacel (Convatec)
MMP regulerend product	Wondverband met lipido-colloïd wondcontactlaag geïmpregneerd met TLC-NOSF.	<ul style="list-style-type: none"> • Breng verband aan met klevende zijde naar wond. • Verwissel na max. 7 dagen. • Kan op maat worden geknipt. 	<ul style="list-style-type: none"> • UrgoStart Plus (Urgo medical)
Foam	Zacht sterk absorberend schuimverband met niet verklevende siliconen wondcontactlaag. Met of zonder border. Hecht aan de wondrand maar niet aan de wond.	<ul style="list-style-type: none"> • Mag maximaal 7 dagen in de wond blijven. • De niet-border variant kan geknipt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mepilex (Molnlycke) • Cutimed siltec (Essity)
Gaas NW	Het non-woven kompres heeft een goed absorptievermogen. Daarbij kan het kompres tevens bij wondreiniging gebruikt worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Product kan geknipt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klinipress NW compres (Klinion)
Absorberend verband	Het wondverband bestaat uit een witte non-woven wondcontactlaag en een wondkussen van 100% katoenen hydrofiele (absorberende) watten hydrofobe toplaag.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwisselen indien nodig. • Product kan niet geknipt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klinipress Exsupad (Klinion) • Leukoplast compress absorbent soft (Essity) • Cutimed sorbion sachet S (Essity) (= superabsorberend verband)
Folie	Transparante en waterdichte zelfklevende fixatiefolie.	<ul style="list-style-type: none"> • Product kan geknipt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cathereepus (Mediq) • Kliniderm film (Klinion) • Opsite wondfolie (Smith&Nephew) • Tegaderm folie (3M)
Fixatiezwachtel	Elastisch windsel.	<ul style="list-style-type: none"> • Bij gewrichten: onder het gewricht starten met wikkelen tot ruim boven gewricht. • Product afknippen op de gewenste lengte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klinifix (Klinion)
Fixatiepleister	<ul style="list-style-type: none"> • Indien er gefixeerd wordt op een conisch lichaamsdeel, snij dan de fixatiepleister in. • Breng de fixatiepleister over het geheel te fixeren product aan, zonder spanning. • Product afknippen op de gewenste lengte. 		<ul style="list-style-type: none"> • Leukopor (Essity) • Micropore (3M) • Fixomull skinsensitive (Essity)
Zwachtelmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> • Watten: Klinisoft synthetische watten (Klinion). • Buisverband: Tubifast (Mediq blauw of geel). • Korte rekwachtel: Klinidur Textelast zwachtel (Klinion) • Tweelaags compressiesysteem: Coban (EAI >0.8) of Coban Lite (EAI 0.5-0.8) (3M). 		

